



《長時間モード (long time mode)》

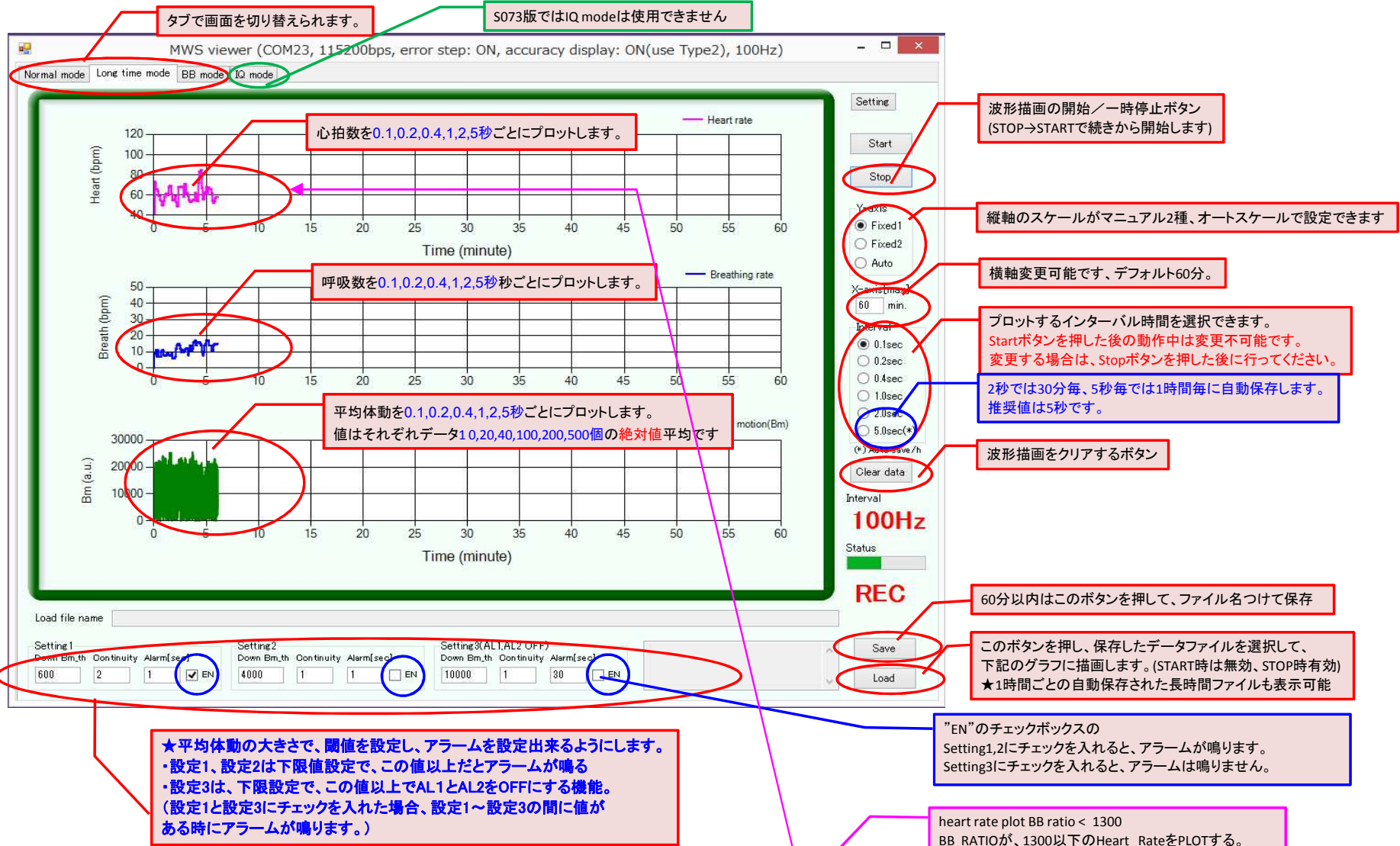

《 BBモード 》

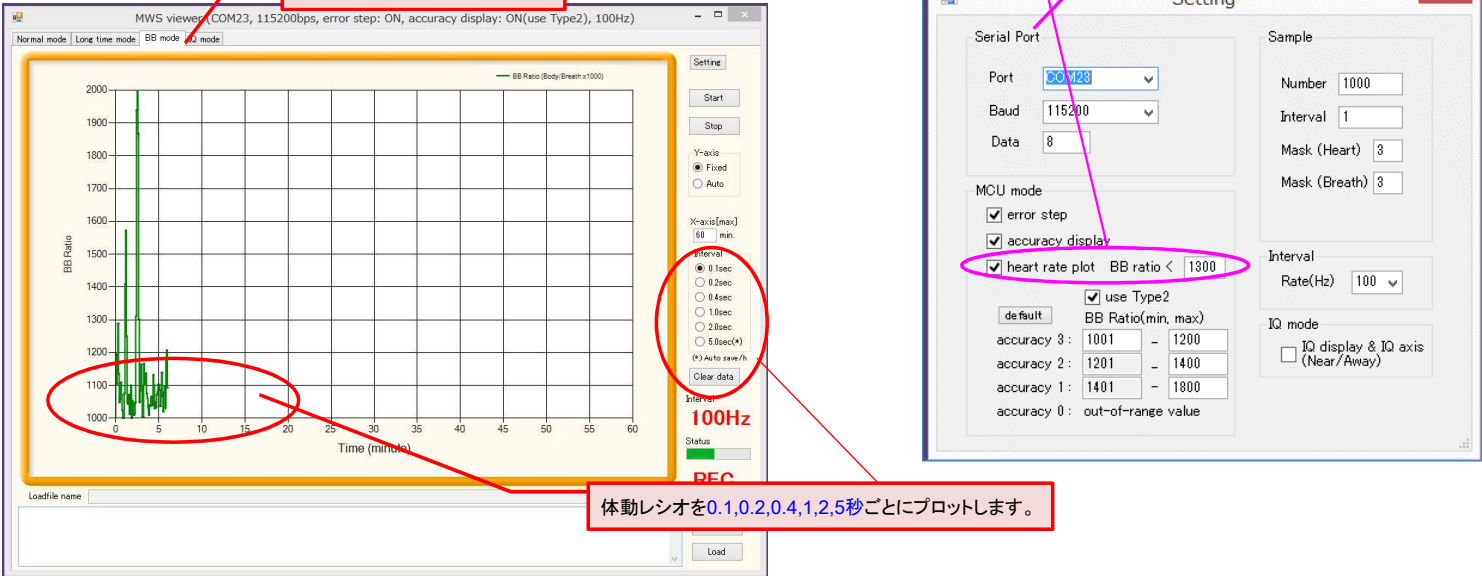

★ログファイル名は、1時間ごとのデータですので、ファイル名は年月日と時分までをつなげたようなものになっています。
★保存されたデータファイルの一例(下記)： 数値をコンマで区切ったテキストファイルで本波形ソフトでLOADできます、加えて、EXCEL等で読めます。

1時間ごとの自動ファイルは開始時刻がファイル名になります

201705151010log.longtime.txt

201705151010RR_BB.txt

タイムスタンプ	心拍	呼吸	体動振幅(絶対値)
Interval 5秒	51	12	3146.4
	51	12	2917.4
	51	12	2389.8
	51	12	711
	51	12	433.8
	51	12	495.6
	51	12	2124
	51	12	2530.8
	51	12	3048
	51	12	3103.2
省略			
	51	12	641.6
	51	12	374.4
	51	12	344.4
	51	12	769.2
	51	12	966.4
	51	12	971.2
	51	12	2592.4
	51	12	2937.6
	51	12	2685.2
	51	12	1913.6
タイムスタンプ	### End: 20170515104039		

タイムスタンプ	自動的にゼロ	BB RATIO
Interval 5秒	0	2002
	0	2002
	0	2002
	0	2002
	0	2002
	0	2002
	0	2002
	0	2002
	0	2002
	0	2002
省略		
	0	1724
	0	1724
	0	1724
	0	1724
	0	1724
	0	1724
	0	1724
	0	1724
	0	1724
	0	1724
タイムスタンプ	### End: 20170515104039	

実行ファイルが置いてあるフォルダに、set3.iniというファイルが生成されます。
この中には、直前まで動作していたアプリの設定が記載されており、次回起動時に読みこめます。

保存される情報:

//設定1(閾値)

//設定1(連続回数)

//設定1(アラーム)

//設定2(閾値)

//設定2(連続回数)

//設定2(アラーム)

//アラームON/OFF

//体動間隔

//設定1(アラーム)

//設定2(閾値)

//設定2(連続回数)

//設定2(アラーム)

//アラームON/OFF

//体動間隔